



マグネットセンサー

取扱説明書 保証書

目次

安全上のご注意	2
各部の名称とはたらき	4
使用方法	5
こんな時には・・・（故障とお考えになる前に）	6
製品仕様	6
保証規定	8

セット内容：

マグネットセンサー本体：1台 クリップ、紐付きマグネット：1個

ハンガー：1個

単3形アルカリ乾電池：3個 保証書付き取扱説明書（本書）：1冊

この度は、マグネットセンサーをお買上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は利用者さんが車イスから立ち上がろうとする時、またはベッドから降りようとした時にお知らせするシステムです。

正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください

■本製品は、あくまでも介護者さんご自身が利用者さんの安全を見守るうえでの手助けをするものです。安全を保証するものではありません。
万一なんらかの損害が発生したとしても一切の責任を免責させていただきますのでご了承ください。

安全上のご注意

本製品を正しく安全にまた良好な状態でお使いいただくために、「安全上のご注意」をよく読んで正しくお使いください。

※品質、性能向上、その他の事情で部品を変更することがあります。
その際には、本書の内容と一部異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示を使用しています。絵表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する※ 重要な内容を記載しています。必ずお守りください。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしてはいけないことを示す記号です。



警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。

次のようなときは、そのまま製品を使用すると火災や感電の原因となります。
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



- 煙が出ている、変なおいや音がする（異常状態）
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本機の内部に水や異物が入った
- 落としたり、破損した



分解しない

分解禁止

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



ぬらさない

水ぬれ禁止

本機をぬらさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。



本機の上に水などの入った容器を置かない

禁止

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。



種類の異なる（たとえばアルカリ乾電池とマンガン乾電池）や新旧の乾電池を一緒に混ぜて使わない

禁止

乾電池の破裂、液漏れによる火災、怪我の原因となります。



乾電池は充電しない

禁止

乾電池の破裂、液漏れによる火災、けがの原因となります。



注意



電気毛布・電気あんななどの電気製品と同時使用しない

禁止

本機の故障や感電の原因となることがあります。



設置場所に注意

禁止

- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など湿度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

禁止

不安定または振動の多い場所、棚などに置かないでください。落ちたり倒れたりして、怪我の原因となることがあります。



本機の上に重いものを置かない

禁止

本機の故障の原因となることがあります。



使用中の情報機器やテレビ・音響機器の近くに置かない

禁止

テレビなどに雑音が生じたり、磁気ディスクに悪影響を与える原因となることがあります。



乾電池使用上の注意




禁止

乾電池の使い方を誤ると、乾電池の破裂、液漏れにより、火災、怪我や周囲を汚損する原因となることがあります。次のことをお守りください。


- 指定以外の乾電池は使用しない。
- 極性(＋と－)に注意し、表示通りに入れる。
- 種類の異なるものや、新旧の乾電池を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電、過熱、分解したり、火や水の中に投入しない。ショートさせない。
- ネックレスなどの金属物と一緒にしない。
- 長期間(1ヶ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておく。

もし液漏れが起こったときは、電池ケースに付いた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。万一漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

各部の名称とはたらき

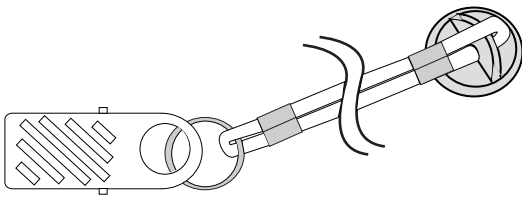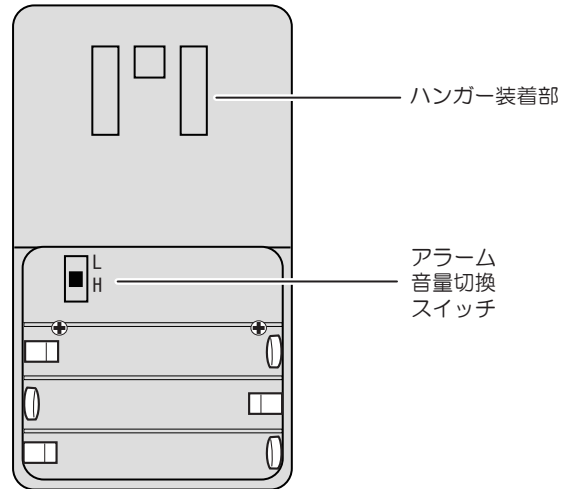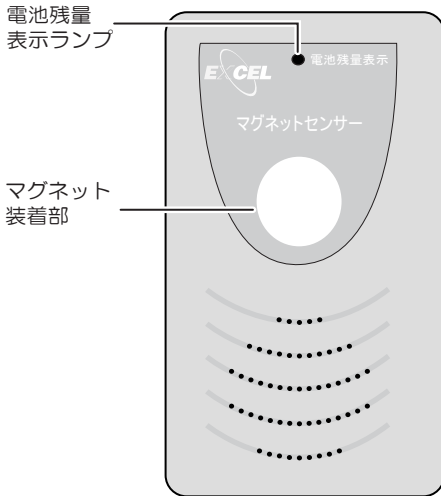

マグネット

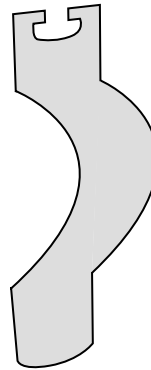

ハンガー

●電池残量表示ランプ

乾電池の残量が少なくなった際に点滅してお知らせします。このランプが点滅をしていたら電池を交換してください。

●マグネット装着部

付属のマグネットを取り付けます。

●アラーム音量切換スイッチ

アラームの音量を切り換えます。(L/H)


●ハンガー装着部

付属のハンガーを差し込んで取り付けます。マグネットセンサーは利用者さんの手の届かないところに取り付けてください。

使用方法

1. 「マグネットセンサー」に単3形アルカリ乾電池をセットします。アラーム音が3回鳴りスタンバイ状態になります。乾電池を入れるとすぐに動作を開始しますので、乾電池を入れる前にマグネットを取り付けてください。
2. 【アラーム音量切換スイッチ】をL/Hにスライドし、音量を設定します。
3. ハンガーを使って車イス / ベッドに取り付けます。
4. マグネットについているクリップを利用者さんに取付けて、紐の長さを適度な長さに調整します。
5. 利用者さんが立ち上がる / 起き上がるなどして本体からマグネットが外れるとアラームが鳴ります。
6. アラームを停止するには本体にマグネットを取り付けなおします。自動的に待機状態に戻ります。

設置例：

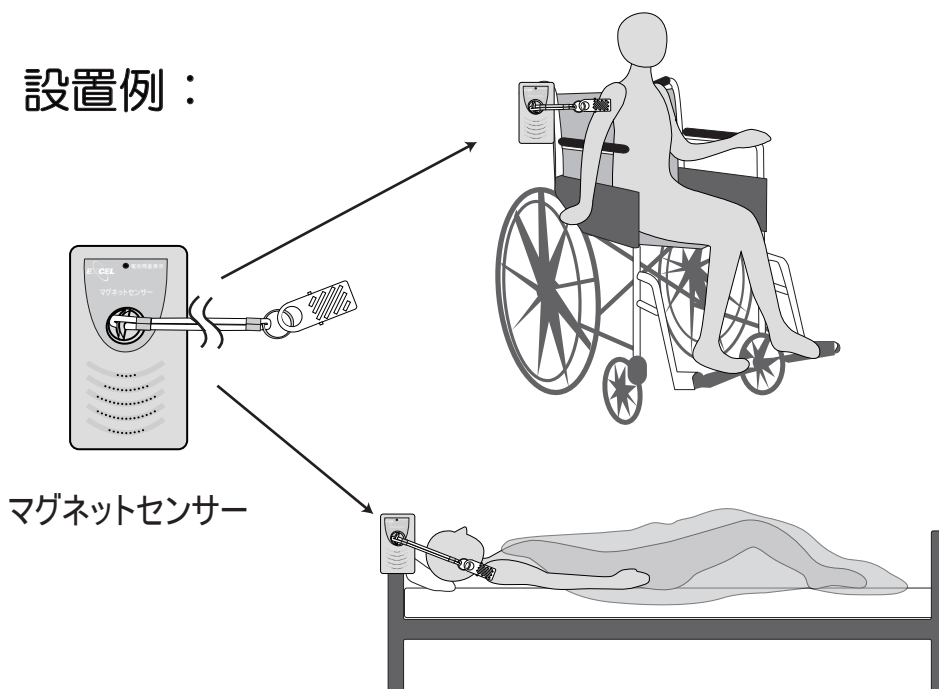

こんなときには・・・（故障とお考えになる前に）

利用者さんが車イス / ベッドから離れているのにアラームが鳴らないとき

- 乾電池がきちんと入っていることを確認してください。乾電池が消耗していないかどうか、また、乾電池が間違っって入っていないかなどを確認してください。
- マグネットがうまく外れない場合は、マグネットについている紐の長さの調整や、本体の位置を調整してください。

マグネットセンサー 仕様

項目	仕様
電源	単3形アルカリ電池3本
電池寿命※1	約1年間
アラーム音量設定	L/H（L：85dBA / H：95dBA）
外形（幅×奥行×高さ[mm]）	62×31×111
重量[g] ※2	約160g

※1 24時間連続使用（1日5回、音量設定 Hで20秒の発報の場合）

※2 ベッドハンガー無し、電池挿入時の重量

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

保証書 (保証規定)

1. マグネットセンサーはお買い上げの日から1年間保証いたします。
2. お客様が取扱説明書にしたがった使用状態のもとで、保証期間内に万一故障をした場合には、無償で修理または交換をさせていただきます。
3. 保証期限内でも次のような場合は有料修理とさせていただきます。
 - ① 本保証書のご提示の無い場合
 - ② 本保証書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - ③ 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - ④ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の仕様電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - ⑤ お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
 - ⑥ 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

* 故障品の修理を円滑にかつ迅速に行なうため、修理をご希望の際は、お買い上げ店またはお客様相談室まで本保証書を添付のうえ、ご郵送ください。

品番	EMG-01		問 合 せ 先	お客様相談室 株式会社エクセルエンジニアリング 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル5F TEL: 03-3516-1560 FAX: 03-3231-1530 http://www.excel-jpn.com
製造番号				
保証期間	* お買い上げ日から1年間 お買い上げ日 年 月 日			
お客様	ご住所	〒		
	お名前	(フリガナ)		
	TEL	市外局番 ()		

販売店	製造発売元 株式会社エクセルエンジニアリング 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル5F TEL: 03-3516-1560 FAX: 03-3231-1530 http://www.excel-jpn.com
-----	--